






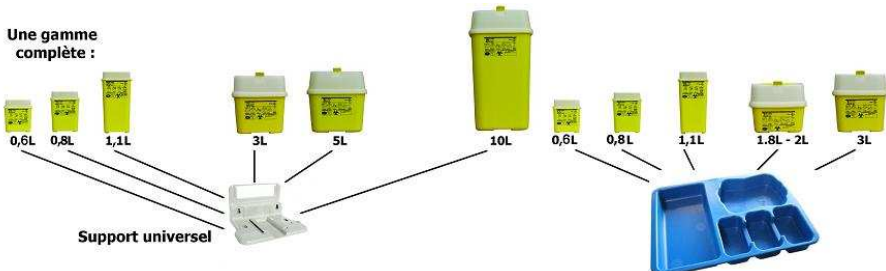

<b>FICHE TECHNIQUE :</b>		<b>DECHETS MEDICAUX</b>			
Désignation :		Mini collecteur 1,1 L			
Gamme :		ESSENTIA			
Référence :	<b>ST07006</b>	Date :	17/03/2011		Page :

 CONTROLE PAR LNE				<b>Dimensions :</b>	(L) 114 x (l)72 x (h) 230 mm
				<b>Poids :</b>	0,1367 gramme
				<b>Matière :</b>	PP 295
				<b>Capacité réelle :</b>	1,06 litre
				<b>Capacité utile :</b>	0,90 litre
				<b>Couleurs :</b>	Jaune et blanc
				<b>Résistances :</b>	Perforation et chute
				<b>Normes :</b>	NFX 30.500, NF302 et ADR UN3291
				<b>Caractéristiques :</b>	Fermeture provisoire et définitive.
				<b>Stérilisation :</b>	Autoclave à 134°C pendant 18 minutes

<b>Composition : Kit 2 pièces</b>			
<b>Pièce 1 :</b>	Cuve 1,1L, jaune	<b>Etiquette :</b>	1,1 L
<b>Pièce 2 :</b>	Couvercle blanc avec trappe		
<b>Remarque :</b>	Ensemble couvercle/trappe, à assembler sur la cuve par l'utilisateur.		

<b>Conditionnement :</b>					
<b>Dimensions carton :</b>	600x300x400 mm	<b>Quantité par carton :</b>	55 kits	<b>Poids carton:</b>	9.3 kg
<b>Dimensions palette :</b>	1200x800x2200 mm	<b>Quantité par palette :</b>	1540 kits	<b>Poids palette :</b>	271 kg
<b>Nombre de cartons par palette :</b>	28	<b>Remarque :</b>			

<b>Description :</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Boîte en PP composée d'une cuve, d'un couvercle avec trappe à ouverture/fermeture mono manuelle provisoire et définitive avec système inviolable ;</li> <li>- Le couvercle est équipé d'un système anti-reflux ; il possède une large ouverture (50x35mm) et des opercules de désolidarisation d'aiguilles, notamment un opercule spécialement conçu pour les embouts de stylos à insuline/adrénaline.</li> </ul>	

<b>Accessoires / Options :</b>	
- <b>Support inox rotatif :</b>	Réf ST04070/73. pour tubes horizontaux ou verticaux.
- <b>Support universel :</b>	Réf ST03841M. Il permet la fixation sur plan horizontal ou vertical, par visserie, anti-dérapant, adhésif double face ou système de serrage autour d'un montant ; pour favoriser la désolidarisation mono-manuelle.
- <b>Plateaux de soins :</b>	Réf ST03999 / ST04090. Il permet d'apporter le collecteur pour un soin au plus près du patient.
 <p>Une gamme complète :</p> <p>0,6L 0,8L 1,1L 3L 5L 10L 0,6L 0,8L 1,1L 1,8L - 2L 3L</p> <p>Support universel</p>	
 «Risque biologique»	